


## Lot de ventouses avec pompe à vide (24 pièces), Art.: M016

S'il vous plaît, lisez ces instructions très attentivement et prêtez de l'attention aux indications médicales. En cas de doute, vous devriez toujours consulter un médecin avant d'utiliser le produit.

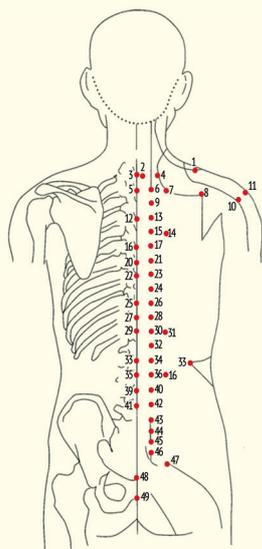

1. épaule saine
2. Anti-asthme
3. Dazhui
4. épaule moyenne point d'acupuncture
5. Taodao
6. Dazhu
7. épaule externe point d'acupuncture
8. Bingfeng
9. Porte d'air
10. épaule / cavité articulaire
11. épaule avant
12. Shenzhu
13. poumons point d'acupuncture
14. Gaomang
15. Jueyingu
16. Shendao
17. Cœur point d'acupuncture
18. Tianzhong
19. Jianzhen
20. Lingtai
21. Duyu
22. Zhiyang
23. diaphragmatique point d'acupuncture
24. bas-ventre point d'acupuncture
25. Jinsuo
26. foie point d'acupuncture
27. centre
28. vésicule biliaire acupuncture
29. au centre du dos
30. rate point d'acupuncture
31. Yishe
32. estomac point d'acupuncture
33. Xuanshu
34. Sanjiaoyu
35. La porte de la vie
36. Rein point d'acupuncture
37. Zhishi
38. Jigmen
39. Xiajiyu
40. Qihaiyu
41. Yasyangguan
42. intestinale point d'acupuncture
43. Guanyuanyu
44. intestin grêle point d'acupuncture
45. vessie point d'acupuncture
46. Zhibian
47. Hanche point d'acupuncture
48. Changqiang

### 1. Instructions d'utilisation:

1. Tirez la tige de valve supérieure pour vous assurer qu'un flux d'air lisse est donné avant d'appliquer la ventouse.
2. Tirez le dispositif 4 fois dans la direction verticale pour générer une pression négative après la fixation de l'ouverture sur la partie supérieure du verre.
3. Une fois que l'application est terminée, tirez la valve soigneusement pour enlever la ventouse.
4. Il est conseillé d'utiliser de la farine ou de la poudre sur les sites de corps musclé ou moins poilus afin d'assurer une prise ferme et un effet de vide optimal. Seulement lorsque la ventouse reste bien en place sur le site de la peau respective, l'effet de vide peut être utilisé.
5. Utilisez un désinfectant liquide pour votre ventouse après l'application propre. Ne la trempez jamais.

### 2. Entretien et réparation

1. Évitez des chutes et des rayures pour garantir l'étanchéité nécessaire.
2. Le bouton de caoutchouc dans le verre doit être maintenu avec le verre. Attachez-le avec les mains ou avec une pince à bec dans le cas qu'il ne reste plus dans la position nécessaire.
3. Vous pouvez démonter la ventouse elle-même pour éliminer la saleté et pour appliquer un peu de graisse pour permettre un vide optimal.
4. Vous pouvez enlever l'étanche à l'air dans le cas où le flux d'air est faible. Ensuite, vous pouvez utiliser le produit de nouveau.

### 3. Méthodes d'application

1. S'il vous plaît, choisissez une posture appropriée en fonction de vos besoins de confort ou d'une maladie.
2. Une application de ventouses prend habituellement entre 10 et 15 minutes. Vous devriez vous offrir tous les jours ou tous les 2 jours une application, 7 applications fournissent une période. La période de traitement suivante, vous devriez commencer à chercher un intervalle de 4 jours.
3. Vous pouvez sélectionner les applications suivantes selon votre état de santé et la partie correspondante du corps: (1) ventouse de récupération (placez le verre sur la partie du corps et le laissez-le là pendant un certain temps). (2) Le flash ventouse (placez le verre sur le corps et maintenez-le pour le retirer ensuite rapidement. Cette méthode est recommandée uniquement si aucune empreinte ne reste sur la partie correspondante du corps). (3) poser des ventouses en mouvant (débranchez la ventouse sur la partie du corps de haut en bas jusqu'à ce que la peau soit légèrement rouge) 4) ventouse avec ponction (ventouses sanglantes): Ici, la zone de la peau est désinfectée et rayée avec un objet pointu aussi désinfecté avant que la ventouse est placée sur le site de la peau pour la génération de vide.
4. Le dispositif peut être utilisé de plusieurs façons, par exemple une ventouse ou plusieurs en même temps. En plus, vous pouvez varier l'intensité des mouvements. Pour les enfants, les personnes âgées et affaiblies il est recommandé d'utiliser plutôt moins de ventouses. Egalement, la durée du traitement devrait être beaucoup plus courte avec environ 5-10 minutes.
5. Ce produit est très efficace dans le traitement d'un coup de chaleur et des points d'acupuncture non fixés.

### 4. Précautions


1. Vous devriez vous abstenir de ventouses si vous souffrez de problèmes cardiaques ou de maladies artérielles. Les femmes enceintes, les patients atteints de cancer, les femmes avec un cycle menstruel, les patients atteints de fractures ou de spasmes devraient généralement abstenir d'applications à l'aide de ventouses.
2. La pièce dans laquelle vous profitez de l'application de ventouses doit être chaude et exempte de courant d'air. Il est recommandé de boire de l'eau chaude après l'application et de ne pas laver les parties traitées du corps pendant environ 30 minutes.
3. Les petites taches sur la peau (bleu, noir, rose ou rouge) qui peuvent être vues après avoir posé des ventouses représentent une sorte de réponse de symptôme. Des points noirs représentent Feng Han (froid), rouge et jaune représentent Re (chaleur). Ne vous inquiétez pas, ces taches vont disparaître pendant 3-5 jours. Il est également normal si vous devriez trouver de petites cloques sur votre peau après une période de traitement. Si les cloques devraient être plus grandes, vous pouvez les tailler avec un objet pointu désinfecté. S'il vous plaît, faites attention à un haut niveau d'hygiène! Nettoyez les parties du corps avec soin et utilisez de l'alcool (75%) pour la désinfection pour empêcher des inflammations.
4. Si les utilisateurs notent des étourdissements, des sueurs froides ou d'autres sensations anormales pendant ou immédiatement après l'application, la ventouse devrait être retirée immédiatement. En plus, il est recommandé de boire de l'eau chaude. Après un court repos, les sensations devraient revenir à un niveau normal.
5. Comme mentionné, les cloques sur la peau ne sont de rien d'inhabituel ou douteux après une période de traitement. Dans des cas graves, vous devriez doucement graver la cloque en utilisant une désinfection suffisante!
6. Assurez-vous que vous utilisez un peu de graisse si vous placez les ventouses sur la peau. Généralement, vous pouvez également utiliser crème de massage ou des lotions.

### Introduction générale concernant le sujet « poser des ventouses »:

Tenant compte de la technologie moderne et de la médecine traditionnelle chinoise, vous tenez un instrument de ventouse nouvellement développé dans les mains qui a été conçu de telle sorte qu'il est facile à utiliser et qu'il a un bon prix. Surtout, il permet des effets sur la santé appréciables. Poser des ventouses de manière traditionnelle peut regarder en arrière sur une longue histoire. Il s'agit d'une utilisation médicale efficace qui a été appliquée essentiellement dans la médecine traditionnelle chinoise. Un vieux proverbe dit que l'acupuncture et des ventouses peuvent déjà battre la moitié d'une maladie, mais des applications avec des ventouses traditionnelles peuvent aussi avoir des inconvénients potentiels dans la forme de brûlures (feu ventouses) et une gamme limitée d'applications.

Notre dispositif de ventouses innovant a remplacé les applications traditionnelles avec feu par une technologie de vide efficace. Fixé sur le corps, le vide fait que les points d'acupuncture sont stimulés spécifiquement parce que la circulation sanguine peut être stimulée de façon efficace. En outre, les ventouses aident à lutter contre les maladies de manière efficace ou pour soulager les symptômes. Ce dispositif de ventouses peut produire un champ magnétique fort et il est très utile dans la lutte contre la douleur, des enflures, une pression artérielle élevée, des taux élevés de lipides sanguins et la désintoxication du corps. Même en termes de dépistage du cancer et de la réduction de la graisse corporelle des effets bénéfiques ont été observés. Ce dispositif à vide peut être utilisé pour de différentes applications et des maladies telles que celles décrites ci-dessus. Le dispositif offre un certain nombre de variantes qui sont également présentées dans la description suivante. Vous gardez une haute qualité et un dispositif de santé efficace dans vos mains, qui sait comment convaincre par son apparence, des normes de sécurité élevées, une fiabilité souhaitable et des effets sur la santé notables. Il dispose d'une conception robuste avec une grande longévité et un excellent rapport qualité-prix.


Nous allons essayer à l'avenir que vous pouvez profiter de la médecine chinoise traditionnelle. Nous allons continuer à recueillir des données cliniques pour assurer que votre santé puisse améliorer un peu plus chaque jour.

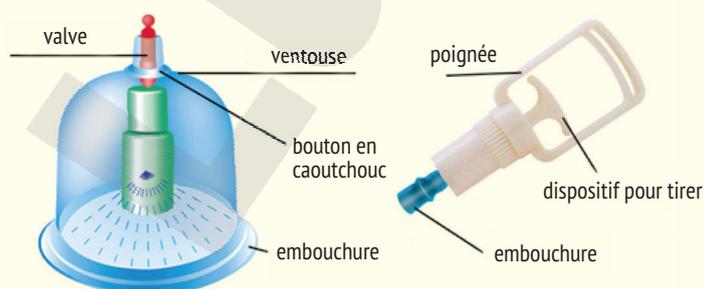

# Applications cliniques

## Le coup de chaleur (thérapie avec rayure pour un coup de chaleur)

**Symptômes:** apathie, manque d'énergie, douleurs abdominales, nausée, malaise général.  
**Points d'acupuncture sélectionnés:** Voir ceux qui ont une ligne rouge dans le graphique

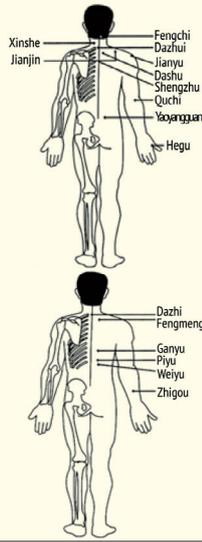


## 1. Diarrhée, douleurs abdominales

**(1) La diarrhée**  
**Symptômes:** douleur dans le bas-ventre, excréments liquides, excréments fréquents  
**Points d'acupuncture sélectionnés:** Piyu, Dachangyu, Qihuzusanli, Guanyan et Shangjuxu.

**(2) Des douleurs abdominales**  
**Symptômes:** douleur dans le bas-ventre, l'angine de poitrine, la douleur se distend (avec sueur froide)  
**Points d'acupuncture sélectionnés:** Zhongwan, Tianshu, Guanyuan, Qihai.

**(3) Les maladies du foie**  
**Symptômes:** insomnie, rêverie, miction, agitation, sein enflé, de fréquents soupirs, fourrure rougeâtre/jaunâtre sur la langue  
**Points d'acupuncture sélectionnés:** Ganyu, Quchi, Taichong, Sheamen, Neiguan, Sanyinjiao.


**(4) Le flegme chaud et mélancolique**  
**Symptômes:** insomnie, tête grave, des tendances de comportement hypocondriaques, amère goût dans la bouche, douleur thoracique, malaise, perte d'appétit, vision floue  
**Points d'acupuncture sélectionnés:** Senmen, Zusanli, Neiguan et Sanyinguan.

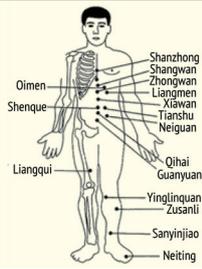

## 2. Maux de tête

**(1) Maux de tête, type froid**  
**Symptômes:** maux de tête rayonnant vers le dos, malaise / sensibilité au vent et au froid  
**Points d'acupuncture sélectionnés:** Fengchi, Fengmen, Taiyang (flash ventouse) (2,5 cm de l'angle externe de l'œil) et Waiguan.


**(2) des maux de tête, de type chaud**  
**Symptômes:** douleur rayonnante, fièvre, sensibilité au froid, langue rouge, fourrure jaunâtre sur la langue  
**Points d'acupuncture sélectionnés:** Dazhui, Fengmen, Taiyang (flash ventouses), Quchi et Taichong.

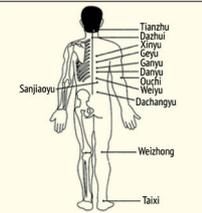

## 3. Maladies cérébrovasculaires

**Symptômes:** hémiplegie, bouche et yeux déplacés, langue raide, sens haptique diminué  
**Sélectionné points d'acupuncture pour les membres supérieurs:** Dazhu, Jiarliao, Jiayu, Quchi, Shousanli, Waiguan et Hegu.

**Points d'acupuncture sélectionnés pour membres inférieurs:** Huantiao, Fengshi, Fulu, Yanglingquan, Zusanli, Xuanzhong, Weizhong, Feng Long, Sanyinjiao et Yinglingquan.

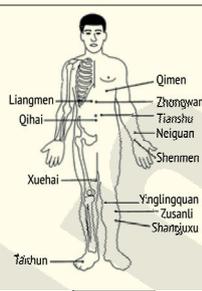

## 4. Arthrite

**Symptômes:** douleurs articulaires, des engourdissements dans les articulations ou même enflures ou déformations  
**Points d'acupuncture sélectionnés sur l'épaule:** Jianliao, Jiayu, Dazhu, Bingfen, Jianjing et Quchi.

**Points d'acupuncture sélectionnés sur le coude:** Quchi, Hegu, Tianjing, et Chize Chuguan.

**Points d'acupuncture sélectionnés sur le genou:** Doubi, Xuehai, Yinglingquan, Yanglingquan, Zusanli, Liangjiu et Fengshi.

**Points d'acupuncture sélectionnés sur la cheville:** Xuanzhong, Sanyinjiao, Kunlun, Shangjuxu, Fuyang et Yongquan.


**Points d'acupuncture sélectionnés sur le bassin et la hanche:** Dazhui, Fengchi, Shenzy, Zhiyang, Jinsuo, Xuanshu, Mingmen, Huantiao et Chibian Yaoyangguan.



## 5. Rhume

**(1) type chaud**  
**Symptômes:** fièvre, sensibilité au douleur, nez qui coule, voix douce, des maux de tête, des douleurs dans les membres, toux, écoulement nasal liquide, couleur de la langue pâle  
**Points d'acupuncture sélectionnés:** Dazhu, Feiyu, Fengmen, Fengchi, Waijian et Taijiang (flash ventouses).


**(2) type chaud**  
**Symptômes:** fièvre, maux de tête rayonnante, toux, bouche sèche, maux de gorge, plus mince et plus pâle fourrure sur la langue  
**Points d'acupuncture sélectionnés:** Dazhu, Quchi, Taiyang (flash ventouses), Fengchi et Tiantu.

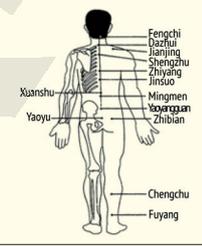

## Maladies de chirurgie orthopédique

### 1. Spondylose cervicale

**Symptômes:** douleur au cou, raideur, coma, la liberté de mouvement restreinte, douleur rayonnant dans le bras, malaise général  
**Points d'acupuncture sélectionnés:** Dazhui, Dazhu, Jianzhongyu, Jianwaiyu, Jianjing, Tianzong, Quchi, Waiguan et Fengchi.

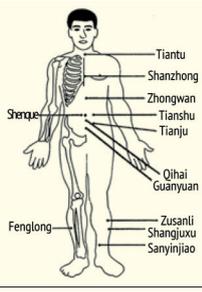

### 2. Périarthrite de Scapulothoracale (épaule)

**Symptômes:** douleur / sensation de pression dans l'épaule, liberté de mouvement restreinte, douleur plus forte dans la nuit  
**Points d'acupuncture sélectionnés:** Jianliao, Jiayu, Jianzhen, Tianzong, Dazhui, Quchi et Lilegu.



## 3. La lombalgie chronique

**Symptômes:** douleur persistante dans la région de la hanche, une amélioration se sent après une grande maladie (par exemple après un rhume)

**Points d'acupuncture sélectionnés:** Shengyu, Yaoyangguan, Qihai, Mingmen, Huantiao, Weizhong, Yabingquan, Yongquan et d'autres points d'acupuncture non fixés.

## 4. Raideur de la nuque

**Symptômes:** raideur de la nuque, causant ainsi la douleur à cause d'une fausse position lors du sommeil

**Points d'acupuncture sélectionnés:** Dazhui, Fengchi, Fengmen, Jianjing, Jianzhongyu, Jianwayu, et d'autres points d'acupuncture non fixés.


## 5. Les blessures du tissu mou

**Symptômes:** enflure partielle, douleur et les restrictions de mouvement causées par surexpansion des muscles et des ligaments etc.

**Sélectionné points d'acupuncture dans la partie supérieure:** Hegu, Shousanli, Quchi et plus points d'acupuncture non fixés.

**Sélectionné points d'acupuncture autour de la hanche:** Yaoyangguan, Weizhong, Dazhui, Yongquan et d'autres points d'acupuncture non fixés.

**Points d'acupuncture sélectionnés dans la partie inférieure:** Weizhong, Chengshan, yanglingquan et d'autres points d'acupuncture choisis temporairement.

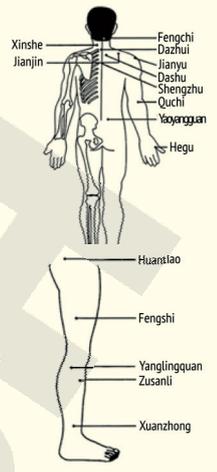

## 6. Douleur dans le talon


**Symptômes:** douleur au talon, incapacité de marcher à la suite d'un traumatisme, d'une surcharge ou d'une irritation

**Points d'acupuncture sélectionnés:** Chengshan, taixi, Kunlun, Yongquan, Zhaohai et d'autres points d'acupuncture non fixés.

## 7. Douleur dans les nerfs des os

**Symptômes:** des douleurs rayonnant dans la hanche, l'arrière des cuisses et les veaux ont une mobilité réduite, la douleur est plus intense après des périodes de repos ou de maladies telles que le rhume

**Points d'acupuncture sélectionnés:** points de réaction à la hanche, Shengyu, Yaoyangguan, Huantiao, Chibian, Jizhong, Chengsan, Yinmen, Xuanzhong, Fengshi, Yanglingquan.

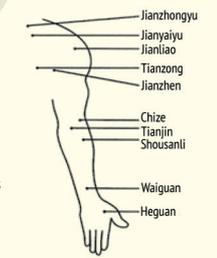

## Maladies gynécologiques

### 1. Menstruation anormale


**Points d'acupuncture sélectionnés (avant la période):** Guanyan, Sanyinjiao, Guilai, Xingjian  
**Points d'acupuncture sélectionnés (après la période):** Guanyuan, Sanyinjiao, Taichong, Ganyu, Xuhai.

**Points d'acupuncture sélectionnés (avec des saignements plus forts):** Guanyuan, Sanyinjiao, Qihai, Taichong, Shenyu, Ganyu, Zusanli.

### 2. Menstruation douloureuse

**Symptômes:** douleur abdominale qui irradie dans la hanche avant la période menstruelle possible. Cela peut également se produire pendant ou après la menstruation

**Points d'acupuncture sélectionnés:** Guanyuan, Sanyinjiao, Qihai, Taichong, Shenyu, Ganyu, Zusanli.

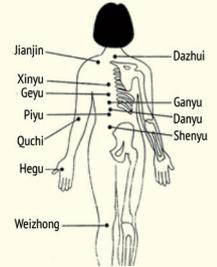

### 3. Syndrome de la ménopause

#### (1) Yin


**Symptômes:** picotements, vertige, fièvre, sueur, trouble, agitation, les joues rouges, peau sèche, menstruation anormale, langue rouge

**Points d'acupuncture sélectionnés:** Guanyan, Xinyu, Sanyinjiao, Shengyu, Yinglingquan, Waiguan, Sanyijiao

#### (2) le manque de Kdney Yan

**Symptômes:** corps léthargique et apathique, sensation de froid, excréments liquides, visage bouffi, quantité suffisante de sang menstruel, activités nocturnes, des mictions fréquentes, langue pâle ou enflée

**Points d'acupuncture sélectionnés:** Zhongwan, Qihai, Mingmen, Xinyu, Guanyuan, Neiguan.

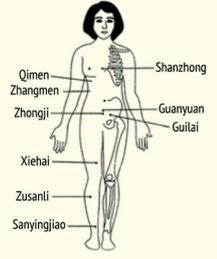

## Maladies des enfants


### 1. pneumonie chez les enfants

#### (1) Type froid

**Symptômes:** sensibilité au froid, fièvre, toux, l'absence de soif, essouffement pâle, couleur pâle de la langue  
**Points d'acupuncture sélectionnés:** Dazhui, Fengmen, Fengchi, Feiyu, Waiguan, Hegu, Quchi.

#### (2) Type chaud

**Symptômes:** sensations de chaleur, toux, agitation, asthme, des sons dans les poumons, augmentation de la soif, les joues rouges  
**Points d'acupuncture sélectionnés:** Dazhui, Feiyu, Fengchi, Fenglong, Geyu, Yuji et Quchi.

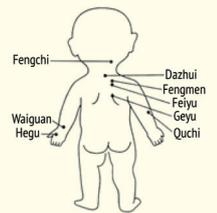

### 2. Indigestion chez les enfants


**Symptômes:** se présente au début comme un rhume, puis l'enfant se sent faible et apathique, après accès de fièvre des paralysies peuvent survenir, les muscles et les articulations peuvent être touchés, la liberté de mouvement est restreinte, température réduite dans les membres  
**Points d'acupuncture sélectionnés (pour le membre inférieur):** Quchi, Fengchi, Zusanli, Yangginguan, Yaoyu, Chibian, Shengyu, Huantiao, Kushua, Taki.



## Maladies de la peau

### 1. L'acné

**Symptômes:** l'acné se réfère à une inflammation chronique des follicules pileux et des glandes, en particulier dans le visage, sur le dos ou la poitrine. Cette maladie est plus typique à l'âge adulte  
**Points d'acupuncture sélectionnés:** Dazhui, Feiyu, Shengyu, Sanjiaoyu, Zusanli, Sanyinjiao (mouvement partiel et poser des ventouses avec ponction).

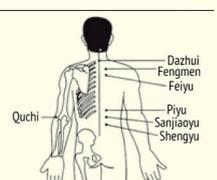

### 1. Urticaire

**Symptômes:** démangeaison extrême à cause des plaques qui caractérisent le teint  
**Points d'acupuncture sélectionnés:** Shenque, Dazhui, Feiyu, Dachangyu, Quchi, Xuehai.

